

ESTETOUCH
MEDICAL

lumina

*DİYOT LAZER
EPİLASYON CİHAZI*



Tüm cilt tipleri ve kıl renkleri için
Güvenli, etkili, kalıcı epilasyon lazeri.

755 NM / 808 NM /
940 NM / 1064 NM

AYRIŞMA SEÇİCİ FOTOTERMAL

Kıl folikülündeki melanin, lazer enerjisini seçici olarak emebilir. Makine tarafından yayılan lazer enerjisi, epidermal dokuya zarar vermeden renkli kıl folikülü tarafından kolayca emilir.

Lazer darbelerine maruz kalma



Önce



Melanin ısıyı emer ve ısınır.




Sonra



I



II

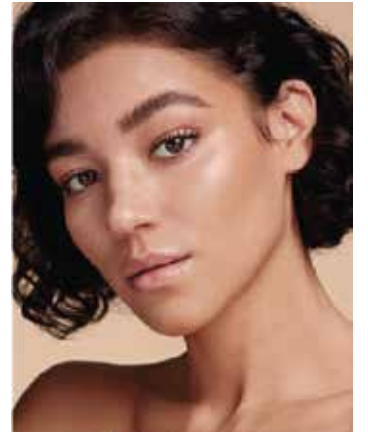

III

I

II

III

IV

V

VI



755nm

808nm 940nm

1064nm



IV



V



VI

4D Lumina Pro Diyot Lazer Epilasyon Cihazı
4 dalga boyu atış özelliği sayesinde tüm cilt tiplerinde
ağrısız , etkili ve kalıcı epilasyon yapmanızı sağlar

4 Dalga Boyu Etkisi Nedir?

ALEXANDRITE 755 NM DALGA BOYU

755nm, Alexandrite çok koyu olmayan ciltler için etkili ve uygun lazer tipidir. Alexandrite lazer kıla koyuluk veren melanin pigmentinde diğer lazerlerden daha yoğun tutulur ve derindeki kıl köklerine ulaşır. Emilim avantajı nedeni ile tolere edilebilen dozlarda kalıcı etki sağlanır. Özellikle kıl kökü 755nm derinlikte olan koyu renk kıllı hastalar için idealdir.

DIODE 808 NM DALGA BOYU

808nm dalga boylu Diode lazer cihazları epilasyon için etkin cihazlar olup Altın standart anlamına gelir. Diğer epilasyon sistemlerinden farklı olarak beyaz olmayan tüm kıl renklerinde etkilidir. 810nm derinliğe kadar olan beyaz hariç tüm kıl renklerinde etkilidir. Hızlı ve az acıdır. Mutlaka epilasyon merkezlerinde olması gereken bir teknolojidir.

DIODE 940 NM DALGA BOYU

LUMİNA 4D diode lazeri diğer tüm diode lazerlerden ayıran en temel özelliklerden biri 4 dalga boyu ve 940nm dalga boyuna sahip olmasıdır.

940nm dalga boyunun özelliği; Kıl folikülünü çevreleyen kese ile folikül arasında skar (Hasar) oluşturarak folikülün beslenme ve güçlenme özelliğini oldukça azaltmasıdır. Bu sayede seansların sonrasında kılların yeniden çıkması büyük oranda engellenmiş olacaktır.

ND:YAG 1064 NM DALGA BOYU

1064nm, daha az melanin emilimi ile karakterize edilen bir dalgadır Bu da onu daha koyu cilt tipleri için hedeflenmiş bir çözüm haline getirir. Aynı zamanda, 1064nm saç folikülüne daha derin nüfuz etme imkanı sunar. Özellikle yüz, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki batık kılların dökülmesinde çok iyidir. 1064nm etkili ve kalıcı bir epilasyon için mükemmel bir kombinasyon imkanı sağlar.

GÜNCELLENMİŞ TEDAVİ KOLU

- Vücudun farklı bölgelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 5 çıkarılabilir tedavi başlığı ile donatılmıştır
- Akıllı dokunmatik ekran, kullanımı kolay.



20mm X 40mm



12mm X 20mm



10mm X 10mm



5mm X 5mm



Φ8mm

Yüz
Burun

Kol Altı


Sırt

Kol

Göbek

Bikini


Bacak

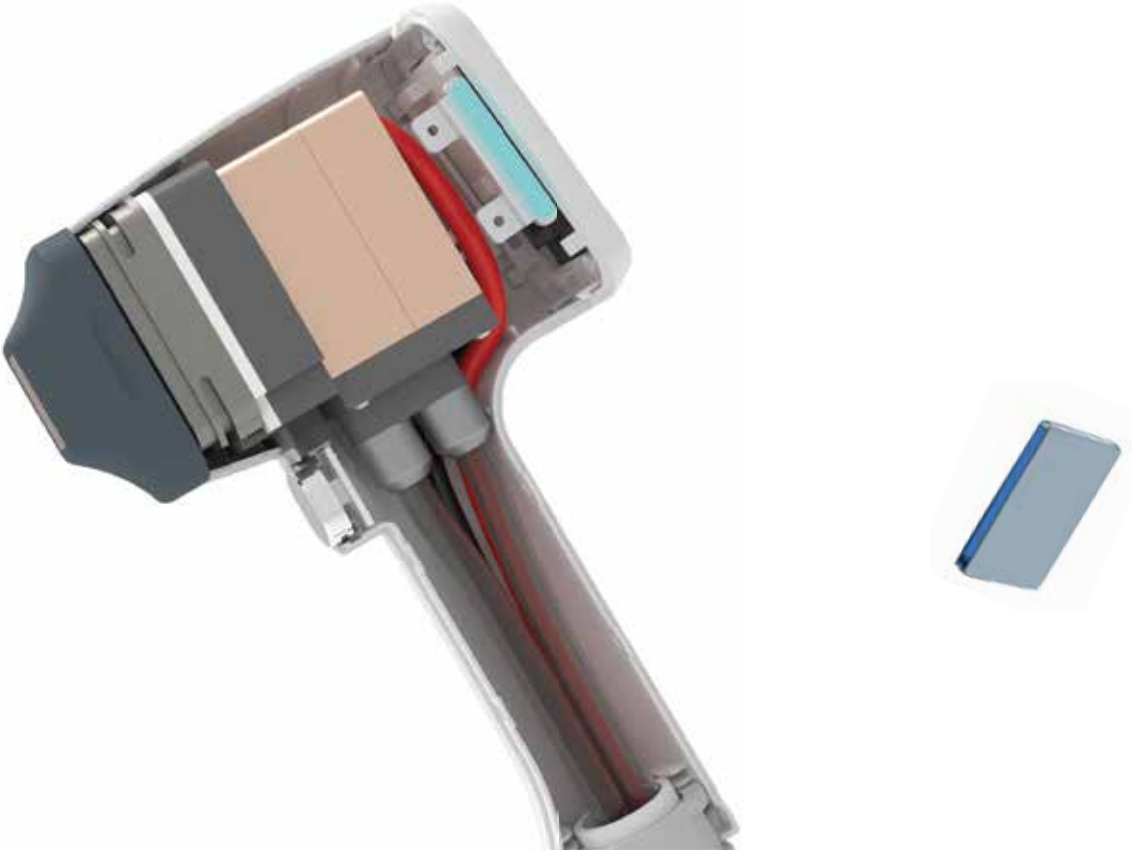

SICAKLIK SENSÖRÜNÜN KONUMU

Sapta bulunan bir sıcaklık sensörü, camın sıcaklığını 0-4° C arasında tutarak güvenli ve konforlu bir tedavi sağlar.



1200W GÜÇ İÇİN TEST RAPORU

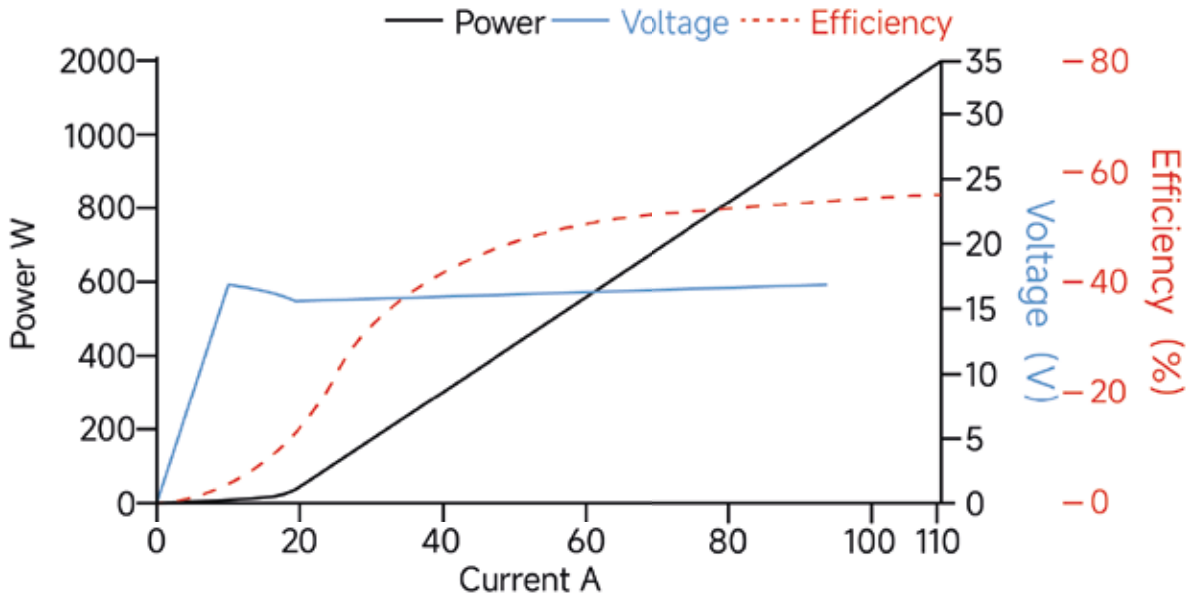

- 1200W yüksek güç
- Amerikan tutarlı lazer çubuğu
- 100 milyon atış garantisi

SOĞUTMA SİSTEMİ AKILLI TERMOSTATİK

Cihaz dahili olarak bir TEC soğutma sistemi ve makinenin su sıcaklığının 25°C'de sabit kalmasını sağlamak için akıllı bir sıcaklık izleme sensörü ile donatılmıştır.

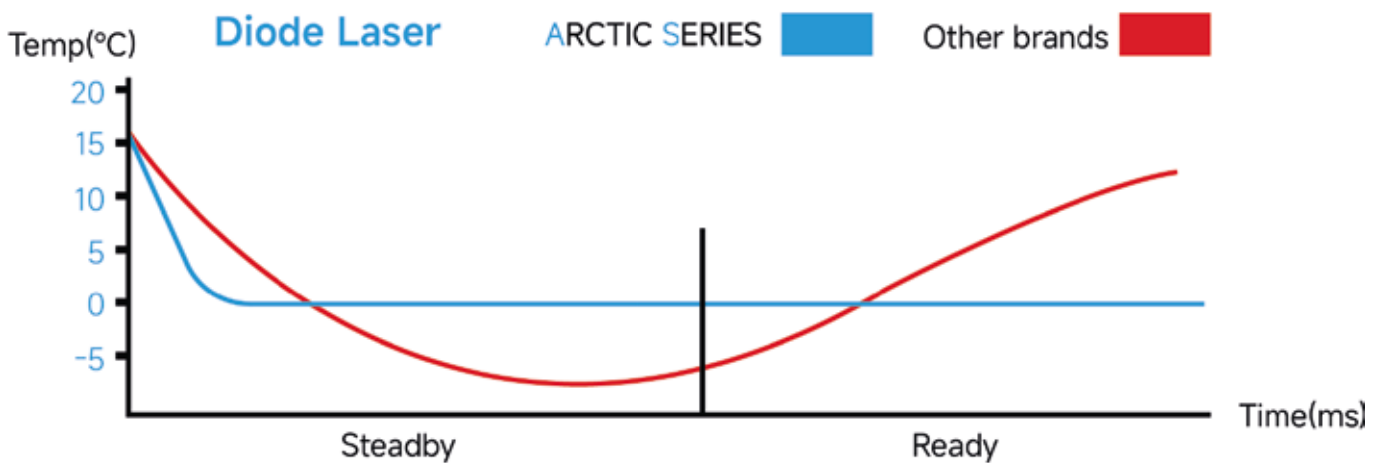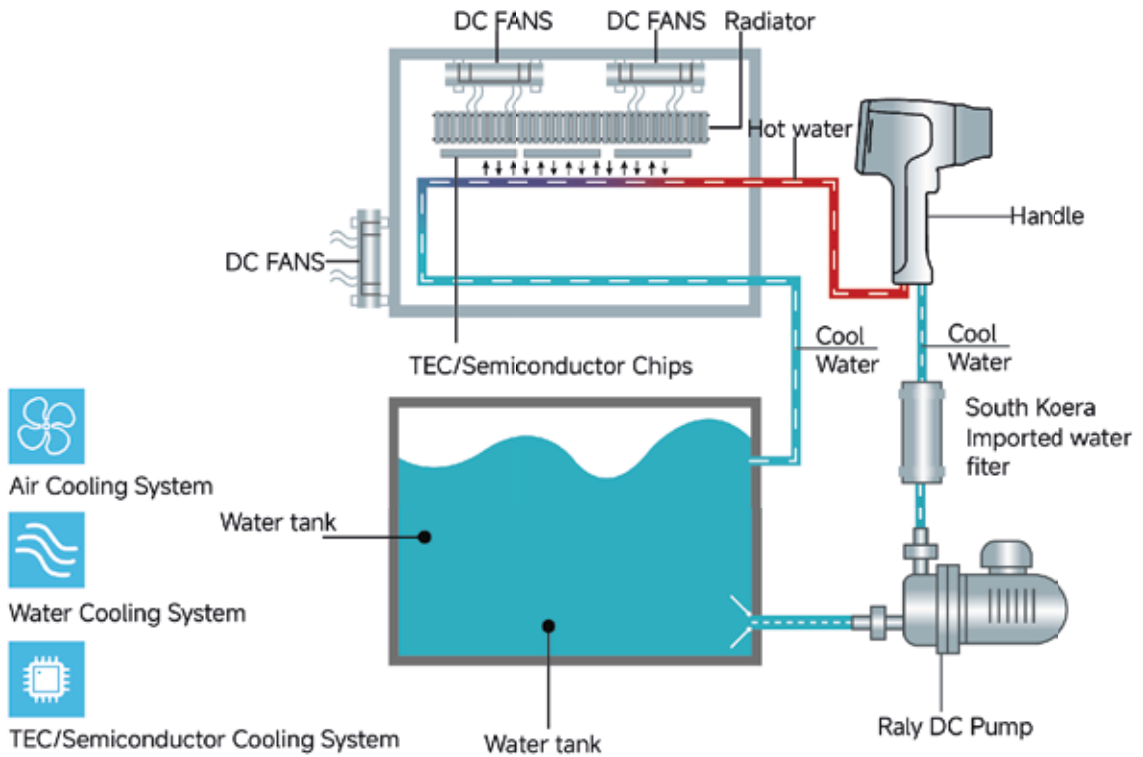

KLİNİK SONUÇLARI:

Klinik testler, vakaların %95'inde 3~5 seanstan sonra %80'den fazla t y azalması rapor edildiđini g stermektedir. 1~2 seanstan sonra, kesinlikle vakalar %30 ila %50 arasında bir azalma g sterir.





DİYOT LAZER EPİLASYON CİHAZI

lumina

TEKNİK ÖZELLİKLER

Dalga Boyu	755nm, 808nm, 940nm, 1064nm
Kol Gücü	1200W
Nokta Boyutu	20*40mm, 12*20mm, 10*10mm, 5*5mm, Φ8mm
Darbe Genişliği	5ms ~ 400ms
Frekans	1HZ ~ 10HZ
Akıcılık	0 ~ 120J/cm ²
Lazer Yoğunluğu	5% ~ 100%
Temas Sıcaklığı	-5°C ~ 5°C
Soğutma Sistemi	Hava + Su + TEC / Yarı İletken + Safir
Ekran	15,6" renkli dokunmatik ekran
Voltaj	AC 220V/50Hz, 110V/60Hz

lumina

ESTETOUCH
MEDIKAL



www.estetouchmedikal.com